

Baxter

Welch Allyn DuraShock

ANEROID BLOOD PRESSURE



アネロイド血圧計

信頼の歴史と
絶え間なく続く技術革新
～洗浄可能なリユーザブルカフ～

デュラショック

指針にカフ圧を伝える歯車機構を排除した耐落下衝撃仕様

AAMI(*)の耐落下衝撃仕様に準拠し、繁忙な臨床現場でも安心してお使いいただけます。

(*)AAMI(米国医療計測機器振興協会規格の略称)

1967年設立 医療技術に関して安全使用及び安全な環境のための機器製品規格及びガイドラインを作成

ウェルチ・アレンの血圧計は全てラテックスフリーです



NO GEAR!!

ゲージ一体型モデル

ゲージをカフに直接取り付けるコンパクトデザインで、体位や場所を選ばずご使用いただけます。

DS44

汎用性を重視した
スタンダードモデル



DS45

精度と操作性を追求した
スーペリアモデル
一台ごとのレーザー刻印目盛と、摩耗に強い
ジュエルムーブメントが高い精度を実現



DS48

スーパーショックレジスタントの
プレミアムモデル
一台ごとのレーザー刻印目盛と、摩耗に強い
ジュエルムーブメントが高い精度を実現



ポケット型モデル

ゲージアダプターの採用でカフ上のポケットにゲージを着脱できるため、従来のコンパクトさはそのままに、文字盤を手元で見ることができるようになりました。※ページ右下にあるカフセットを同時にご購入ください。

DS44A

DS44のポケット型デザイン



(DS44A取り付け例)

DS45A

DS45のポケット型デザイン



(DS45A取り付け例)

DS48A

DS48のポケット型デザイン



(DS48A取り付け例)

ハンド型モデル

送気球が一体になったゲージは、持ちやすさを追求した人間工学的デザインで操作性を高めます。

DS55

伝統的なデザインのスタンダードモデル



DS66

指一本で減圧制御が可能な
トリガー式減圧バルブ



DS58

スーパーショックレジスタントの
プレミアムモデル



タイコス767シリーズ

『Tycos』を代表する長年の歴史あるデザイン

1 読みやすく正確な文字盤

- ・直径15cmのタイコス767シリーズの文字盤は、一台ごとにレーザー刻印されており、より高い目盛精度を提供します。
- ・奥行きを持たせたデザインと明確な色調のコントラストは離れていても読みやすい設計です。

2 摩耗に強いジュエルムーブメント

指針のベアリングに摩耗に強いルビーを採用し、安定した精度を保持します。



7670-16



7670-10

標準で付属されているカフは成人用(中)のみです。



7670-01

製品仕様

ゲージ一体型モデル		ポケット型モデル		ハンド型モデル		タイコス767シリーズ	
・測定範囲 0~300mmHg ・精 度 ±3mmHg ・レーザー刻印目盛 DS44:無 DS45・DS48:有 ・ジュエルムーブメント DS44:無 DS45・DS48:有 ・耐落下衝撃性 DS44・DS45: 76cmの高さからの耐落下衝撃設計 DS48: 152cmの高さからの耐落下衝撃設計 ・精度保証※ DS44・DS45:5年 DS48:10年		・測定範囲 0~300mmHg ・精 度 ±3mmHg ・レーザー刻印目盛 DS44A:無 DS45A・DS48A:有 ・ジュエルムーブメント DS44A:無 DS45A・DS48A:有 ・耐落下衝撃性 DS44A・DS45A: 76cmの高さからの耐落下衝撃設計 DS48A: 152cmの高さからの耐落下衝撃設計 ・精度保証※ DS44A・DS45A:5年 DS48A:10年		・測定範囲 0~300mmHg ・精 度 ±3mmHg ・レーザー刻印目盛 DS55・DS66・DS58:有 ・ジュエルムーブメント DS55:無 DS66・DS58:有 ・耐落下衝撃性 DS55・DS66: 76cmの高さからの耐落下衝撃設計 DS58: 152cmの高さからの耐落下衝撃設計 ・精度保証※ DS55:5年 DS66・DS58:10年		・測定範囲 0~300mmHg ・精 度 ±3mmHg ・レーザー刻印目盛 有 ・ジュエルムーブメント 有 ・耐落下衝撃性 耐衝撃性はありません ・精度保証※ 10年	
カタログ番号	型 式	カタログ番号	型 式	カタログ番号	型 式	カタログ番号	型 式
DS44-09	DS44 小児用(中)カフ付	DS44A	DS44ポケット型 ゲージのみ	DS-5501-189	DS55 ブラック 成人用(中)カフ付(ソフトケース付)	7670-01	ウォール型 成人用(中)カフ付
DS44-10	DS44 成人用(小)カフ付	DS45A	DS45ポケット型 ゲージのみ	DS-5521-129	DS55 ブルー 成人用(中)カフ付(ソフトケース付)	7670-10	スタンド型 成人用(中)カフ付
DS44-11	DS44 成人用(中)カフ付	DS48A	DS48ポケット型 ゲージのみ			7670-16	デスクトップ型 成人用(中)カフ付
DS44-12	DS44 成人用(大)カフ付	ポケット型モデルで使用するには上記ゲージと、下記カフセットをお選びください		5098-27	DS66 成人用(中)カフ付(ソフトケース付)		
DS44	DS44 ゲージのみ			5098-29	DS66 小児用(中)カフ付(ソフトケース付)		
DS45-09	DS45 小児用(中)カフ付	REUSE-07-2BV	乳幼児用 送気球付き	5098-31	DS66 ゲージのみ		
DS45-10	DS45 成人用(小)カフ付	REUSE-08-2BV	小児用(小)用 送気球付き	DS58-11	DS58 成人用(中)カフ付(ソフトケース付)		
DS45-11	DS45 成人用(中)カフ付	REUSE-09-2BV	小児用(中)用 送気球付き	DS58	DS58 ゲージのみ		
DS45-12	DS45 成人用(大)カフ付	REUSE-10-2BV	成人用(小)用 送気球付き				
DS45	DS45 ゲージのみ	REUSE-11-2BV	成人用(中)用 送気球付き				
DS48-11	DS48 成人用(中)カフ付	REUSE-12-2BV	成人用(大)用 送気球付き				
DS48	DS48 ゲージのみ	REUSE-13-2BV	大腿部用 送気球付き				

※精度保証はゲージのみ。カフ、送気球等の消耗部は含みません。

製造販売届出番号:13B2X00086000001

一般医療機器 アネロイド式血圧計

JMDNコード 16156000

製造販売業者名:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社



Hillrom™

フレックスポート™カフ

洗浄可能なリユーズブルカフ

ラテックスフリーのリユーズブルカフは洗浄しやすい素材とシンプルなワンピース構造により、感染対策をサポートします。専用のカフポートプラグをご購入ください。



洗浄用カフポートプラグ:5082-159


1 チューブの着脱を可能にしたフレックスポート

- ・1チューブ、2チューブといった異なる仕様の血圧計に共通のカフが使用できることで、異なる診療科間で患者さんと一緒にカフを移動させる“カフのトラベリング”が容易となり、カフの品種統合によって在庫管理の煩雑さを軽減します。
- ・チューブの接続部は、チューブの向きに合わせて360度回転するため、接続部にかかる負荷を軽減し、破損やエア漏れなどのトラブルを減少します。

2 豊富なサイズと識別容易なカラーコード

リユーズブル、ディスポーザブル共に豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードは識別が容易です。

3 ラテックスフリー

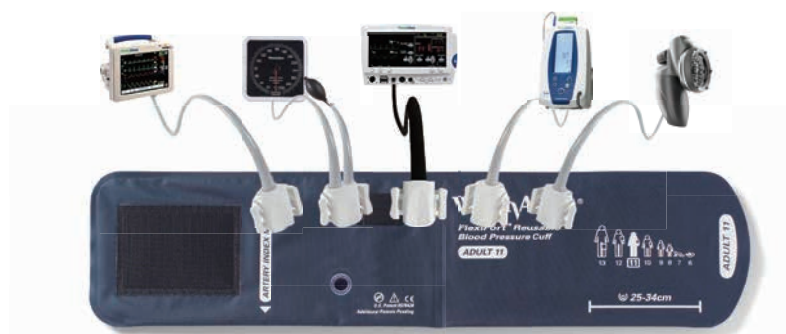

リユーズブルカフ

洗える
カフ



ディスポーザブルカフ



カタログ番号	型 式	カタログ番号	型 式
REUSE-06	リユーズブルカフ 新生児用	SOFT-06	ディスポーザブルカフ 新生児用(20枚入)
REUSE-07	リユーズブルカフ 乳幼児用	SOFT-07	ディスポーザブルカフ 乳幼児用(20枚入)
REUSE-08	リユーズブルカフ 小児用(小)	SOFT-08	ディスポーザブルカフ 小児用(小)(20枚入)
REUSE-09	リユーズブルカフ 小児用(中)	SOFT-09	ディスポーザブルカフ 小児用(中)(20枚入)
REUSE-10	リユーズブルカフ 成人用(小)	SOFT-10	ディスポーザブルカフ 成人用(小)(20枚入)
REUSE-11	リユーズブルカフ 成人用(中)	SOFT-11	ディスポーザブルカフ 成人用(中)(20枚入)
REUSE-12	リユーズブルカフ 成人用(大)	SOFT-12	ディスポーザブルカフ 成人用(大)(20枚入)
REUSE-13	リユーズブルカフ 大腿部用	SOFT-13	ディスポーザブルカフ 大腿部用(20枚入)

製品のお問合せにつきましては、以下よりお問合せください

〒104-6009 東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエア・オフィスタワーX 9階

TEL. 03-4520-1700 FAX. 03-4560-4200

- 製品の色は印刷のため実際とは多少異なります。
- 製品仕様は、予告なく変更する場合がございます。

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

Electronic Certificate

Version: 1 . 0

Document Number: JP-FLC74-230001

Document Name: アネロイド血圧計カタログ

Country: Japan

Product: Gold Series DS66 Trigger Aneroids Platinum Series DS48 Integrated Aneroids Platinum Series DS58 Hand Aneroids Tycos 509 Wall and Mobile Aneroids Tycos Classic Pocket Aneroids Tycos Classic Hand Aneroids Platinum Series DS48A Pocket Aneroids Bronze Series DS44 Integrated and Pocket Aneroids Silver Series DS45 Integrated and Pocket Aneroids

Type: Material

Sub Type: Advertisement

Classification: Product Catalog

Business Unit: Frontline Care

Target Audience: Healthcare Professional

Method of Distribution: Print (Publication, Magazine, Program Booklet)

Submission Required?: false

Certification Statement

I certify that I have examined the compliance copy and that:

- All required changes identified during the adprom review process have been incorporated;
- No other changes, aside from non-significant grammatical edits, have been made;
- The proofreading step of comparing the Master Annotated Copy (MAC) to the compliance copy has been completed

Role	Signature
Matsumoto Masashi - Certifier: Certify Document (masashi_matsumoto@baxter.com)	Meaning: As the Certifier, I approve this document for use. Date: 26-Jun-2023 00:48:17 GMT+0000