

Baxter
Welch Allyn
Green Series



自然光に近い色合いのLEDライトを使用した 処置・診断用照明機器です。


◎熱を持たず、明るく自然光に近い色合いでの観察を可能にします。

◎タッチレスコントロールパネルは機器本体に触れずに電源のON/OFF（全機種）や、光量の調整（GS600のみ）が行えます。

◎設置方法はテーブル/ウォールマウント式とモバイルスタンド式から選択できます。



48810-J
+
48950

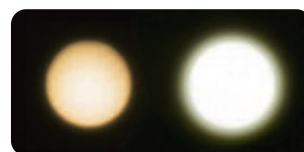

ハロゲンライト LEDライト



タッチレスコントロールパネル
※上記はGS600の例でモデル
により仕様が変わります。

GSイグザミネーションライト IV

●用途に合わせて自由自在な角度調整

柔軟でフレキシブルなファイバーオプティックライト
パイプは、3ヶ所で自由に角度調整が可能です。

●集光コンパクトヘッド

フォーカススリーブによるスポット集光で観察野に
明るい白色光を照射します。



48810-J

GS 300 LEDライト

- コンパクトデザインで
必要な光を的確な場所へ
フレキシブルアームにより前後左右の
角度調整ができます。



GS 600 LEDシステムライト

- 3灯のLEDライトでより明るく
フレキシブルアームにより前後左右の
角度調整ができ、光量調整(2段階)も
可能です。



製品仕様

カタログ番号	型 式 名	カタログ番号	型 式 名
44400-J	GS300 LEDライト モバイルスタンド付	52630	GS600/GS900 用ディスポーザブルライトカバー (50枚×5箱)
44410-J	GS300 LEDライト テーブル/ウォールマウント付		カバーサイズ: 22.5×7.0cm
44600-J	GS600 LEDシステムライト モバイルスタンド付	52640	GSイグザミネーションライト IV用
44610-J	GS600 LEDシステムライト テーブル/ウォールマウント付		ディスポーザブルライトパイプカバー (25枚×5箱)
48810-J	GSイグザミネーションライト IV テーブル/ウォールマウント付		カバーサイズ: 130.0×7.0cm
48950	モバイルスタンド (GSイグザミネーションライト IV用)		

型 式 名	GSイグザミネーションライトIV	GS 300 LEDライト	GS 600 LEDシステムライト
			
色温度	5,500° K	5,500° K	5,500° K
照度 (標準作業距離時)	20,000ルクス	20,000ルクス	50,000ルクス
LED寿命	50,000時間	50,000時間	50,000時間
作業距離	40.0cm	30.5 - 50.0cm	30.5 - 50.0cm
照野径 (標準作業距離時)	10.0 - 25.0cm	13.0 - 15.0cm	15.0 - 18.0cm
電 源	100-240V 50/60Hz, 0.30A	100-240V 50/60Hz, 0.35A	100-240V 50/60Hz, 0.65A
重 量	48810-J: 2.40kg 48810-J+38950: 5.63kg	44410-J: 2.56kg 44400-J: 5.78kg	44610-J: 2.93kg 44600-J: 7.87kg
寸 法	■コントロールパネル 高さ×幅×奥行き 27.5×10.0×8.0cm ■ライトヘッド (フォーカススリーブ) 長さ×直径 13.1×4.0cm ■モバイルスタンド 高さ×直径 61.0×53.0cm ■機器全体高さ (概寸) 48810-J: 120.0cm 48810-J+48950: 153.0cm	■コントロールパネル 高さ×幅×奥行き 27.5×10.0×8.0cm ■ライトヘッド 高さ×幅×奥行き 19.0×9.0×8.0cm ■モバイルスタンド 高さ×直径 61.0×53.0cm ■機器全体高さ (概寸) 44410-J: 84.5cm 44400-J: 149.0cm	■コントロールパネル 高さ×幅×奥行き 27.5×10.0×8.0cm ■ライトヘッド 高さ×幅×奥行き 34.5×19.2×8.6cm ■モバイルスタンド 高さ×直径 61.0×53.0cm ■機器全体高さ (概寸) 44610-J: 84.5cm 44600-J: 149.0cm
電源コード長	2.5m	2.5m	2.5m

販売店

【製造販売元】

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

〒104-6009 東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアタワーX棟 9階

TEL: 03-4567-1403 / FAX: 03-4560-4200

販売名: ウェルチ・アレン 処置・診断用照明機器

規制区分: 一般医療機器 クラスⅠ

JMDN: 36843000

一般の名称: 移動型診療用照明器

届出番号: 13B2X00086000037

製造販売業者 ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

JP-FLC75-230001 V1.0 2024年1月作成