



Hillrom™

Welch Allyn® PanOptic™ 検眼鏡

観察視野の 拡大


Welch Allyn 新パンオプティックベーシックおよびパンオプティックプラスで、より明るく大きな視野を提供します。QuickEye™アライメントテクノロジーと眼底画像を保存し共有できるオプションを備えたパンオプティックプラスとスマートフォンを使用すれば、眼の検査を充実させることができます。

どちらの機器も既存のWelch Allyn 3.5Vパワーソースで動作します。

2つのインジケータライトにより、患者の視線を誘導し、視神経乳頭の位置合わせをより簡単に行うことができます。
(パンオプティックプラスのみ)



パンオプティックプラスを iExaminer スマートブラケット及び iExaminer Pro アプリと組み合わせてスマートフォンで使用すると眼底画像の保存や共有ができます。

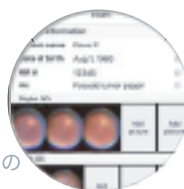

仕様	パンオプティック プラス	パンオプティック ベーシック
カタログ番号	118-3	118-2
iExaminer デジタル対応	あり	なし
Quick Eye™ アライメントテクノロジー	あり	なし
保証期間	1 年	1 年
高さ x 幅 x 奥行き	8 cm x 4.5 cm x 7.5 cm	
重量	130 g	
アパーチャー	小、大、レッドフリー、スリット、固視標、コバルトブルー	
補正レンズ範囲	-20~+25 D	
補正レンズ	-20、-15、-12、-10、-9、-8、-7、-6、-5、-4、-3、-2、-1、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、20、25	
電球	SureColor™ LED	
色	カラーレンダリングインデックス (CRI) : 95 標準、R9: 85 標準、色温度: 2700 K~3500 K	
電球寿命	約80年※1	
観察視野	20°	

20 倍に拡大
観察視野



弊社標準品※の
検眼鏡



PanOptic 検眼鏡

※弊社標準品：カタログ番号 17200

仕様	Welch Allyn® リチウムイオン充電式 ハンドル (USB 充電器付き)	Welch Allyn® ユニバーサル デスクチャージャー
カタログ番号	719-3	719-DSK-J
高さ x 幅 x 奥行き	14 cm x 3 cm x 3 cm	10 cm x 19 cm x 11 cm
重量	140 g	1.2 kg
互換性	71140 / 71640 / 719- DSK-J	71140 / 71640 / 71910 / 719-3
内蔵充電機能	USB-C	—
保証期間	1 年	1 年
動作時間	5.5 時間 (30 秒の検査を約 660 回)	—
バッテリータイプ	リチウムイオン	—
USB クイック充電時間 (0~75%)	90 分	—
電源コードとコードオプション	719-USB-J	#18 AWG、3 線式接地コード、長さ 6 フィートの医療用グレード、IEC60320 インレットで着脱可能
入力	—	100~240 V、50~60 Hz、最大 100 mA、クラス I、連続使用
出力	—	2.4 V~4.0 V DC 最大 80 mA

届出番号：13B2X00086000033, 13B2X00086000030
 一般医療機器 直像検眼鏡/汎用光源 JMDNコード 12817000/32037000
 製造販売業名：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

パンオプティックアクセサリ

- 118-EC : パンオプティック用アイカップ (5個入)
 11840-IEX : iExaminer キット



本製品についての詳細は、出入りの業者様または弊社ウェブサイト (Hillrom.jp) へお問い合わせください。

hillrom.jp

Hill-Rom は、設計、仕様、およびモデルを予告なく変更する権利を留保します。

11日あたり平均 4 回の患者検査 (両眼)、片眼あたり 15 秒、年間 200 日と想定しています。

© 2021 Welch Allyn, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. APR246004 第1版 2021年6月24日 日本語 - 日本

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町5F
 TEL. 03-4520-1700 FAX. 03-3436-0290